


# Askina® Absorb+ חדש

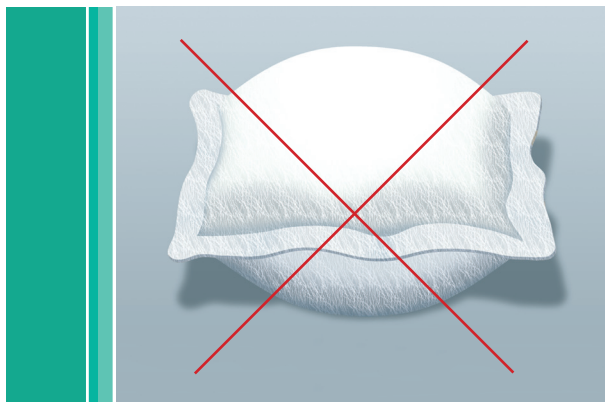

חבישה עם כושר ספיגה גבוה במיוחד וארוך טווח, כולאת כמות גדולה של הפרשות וחידקים.

## התוויה:

משמשת כחבישה ראשונית או משנית

## תיאור המוצר:

מורכבת מפד פנימי עשוי מסיבים פולימרים עטוף בכיס חיצוני ארוג (3 מרכיבים מיובשים כחומר אחד). במגע עם הפרשות הפצע, הנוזל הופך לג'ל רך וגמיש. לא נדבקת לפצע ואין אפקט של ספוג. החבישה אינה מכילה אבקה ולכן אין חשש להתגבשות של ג'ל סביב חלקיקים שחוסמים את המרחק הספיגה וכך, פנים החבישה נשאר יבש לאורך זמן גם כאשר החבישה ספוגה בהפרשות. אין חשש למסרציה בשולי הפצע.

## אופן השימוש:

- (1) יש לבחור בגודל מתאים כך שיישארו 2-3 ס"מ מסביב. ניתן לשים מספר חבישות זו לצד זו, לכיסוי פצע גדול
  - (2) יש לקבע עם חבישה משנית
  - (3) להשאיר בהתאם לכמות ההפרשה ועד 5 ימים.
- \* ניתן להשתמש תחת חבישת לחץ

BR032/01 FEB.-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
Askina Absorb+ 10x10CM	10	54723					
Askina Absorb+ 10x20CM	10	54724					
Askina Absorb+ 20x20CM	5	71814					