

ENZYME ALGINOGEL

לטיפול במגוון סוגי פצעים

פלאמינל® הידרו



פלאמינל® הידרו לטיפול בפצעים עם הפרשה מועטה עד מתונה, כגון:

- כיבים ורידיים
- כיבים סוכרתיים
- כוויות מדרגה שנייה
- פצעים הנובעים מנזקי קרינה
- פצעים אונקולוגיים
- שפשופים נרחבים
- פצעים לאחר כירורגיה דרמטולוגית

פלאמינל® פורטה



פלאמינל® פורטה לטיפול בפצעים עם הפרשה מרובה כגון:

- כוויות מדרגה שנייה עם הפרשה מרובה
- כיבים ברגליים עם הפרשה מרובה
- פצעי לחץ מפרישים
- פצעים אונקולוגיים מפרישים
- הכנת מיטת הפצע לקראת ניתוח

מוצר אחד חמש פעולות

1. פלאמינל® שומר על סביבה לחה
2. פלאמינל® מבצע הטריה מתמשכת
3. פלאמינל® מספק פעילות אנטי-בקטריאלית
4. פלאמינל® תומך בתהליך ריפוי הפצע
5. פלאמינל® מגן על עור בריא בשולי הפצע

פלאמינל הידרו ופלאמינל פורטה תומכים בתהליך הריפוי הטבעי ומספקים הגנה כנגד זיהומים

פלאמינל® הינו מוצר עם חומר פעיל לריפוי פצעים, המכונה אנזים אלגינוג'ל® (enzyme alginogel®). הוא עשוי ממערכת אנזימתית בעלת פעילות אנטי-בקטריאלית והמשוקעת בתוך אלגינטים

אופן השימוש

**מריחת או החלפת חבישה עם פלאמינל הינה קלה ומשוחררת מכאבים.
פעל בהתאם לשלבים הבאים :**


1. ראשית שטוף ונקה את הפצע

2. טפח ויבש בזהירות

3. מרח על כל מיטת הפצע 3-4 מ"מ פלאמינל®

4. כסה את שכבת הפלאמינל® עם גזה. בחירת סוג החבישה צריכה להתבסס על פי סוג הפצע:

- פצע יבש : פילם שקוף (פוליאוריטאן) או עם גזה-ואזלין
- פצע עם הפרשה מועטה : פד גזה או חבישה נדבכת
- פצע עם הפרשה מתונה: חבישת גאזה סופגת ולא נדב־קת או חבישה נדבכת

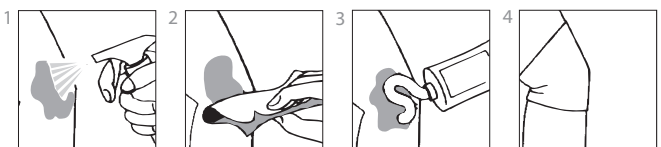

חשוב לדעת:

- יש לבדוק את החבישה מדי יום. אם היא "נוזלת" או שאין מספיק ג'ל, יש להחליף את ה- פלאמינל® ולהניח חבישה חדשה.
- במהלך טיפול בעזרת פלאמינל® עשויים להופיע על גבולות הפצע "פתיתי" אלגינאט יבשים בצבע לבנבן. אין להסיר אותם. ה"פתיתים" ימנעו מסמום של העור סביב לפצע . מסמום עלול לגרום נזק לרקמה הבריאה.
- אם מופיעים במיטת הפצע "פתיתים" יבשים לבנבנים של אלגינאטים, כסה את שכבת ה- פלאמינל® כפי שהיית עושה במקרה של פצע יבש. הפתיתים בתוך הפצע ייעלמו כאשר ישוב מאזן הלחות לקדמותו.
- אם פלאמינל® הידרו מתנזל במהירות, כנראה שהפצע מפ־ריש יותר מדי עבור פלאמינל® הידרו, השתמש ב-פלאמינל® פורטה.
- החבישה בעזרת פלאמינל® יכולה להישאר במקומה כל עוד מבנה הג'ל שלם (יום 1 עד 4 ימים, כתלות בכמות ההפ־רשה).
- בשלב ההתחלתי של הטיפול ייראה הפצע כאילו הוא נעשה גדול יותר. זהו חלק נורמלי מתהליך הריפוי שבו מתבצעת הטריה אוטוליטית.

פלאמינאל הידרו ופלאמינאל פורטה תומכים בתהליך הריפוי הטבעי ומספקים הגנה כנגד זיהומים

למידע נוסף:



אתר: www.cwt.org.il
דוא"ל: info@cwt.org.il
טלפון: 052-6201526
פקס: 08-9287779