


Askina®

מגוון חבישות ומוצרים לטיפול בפצעים וכוויות

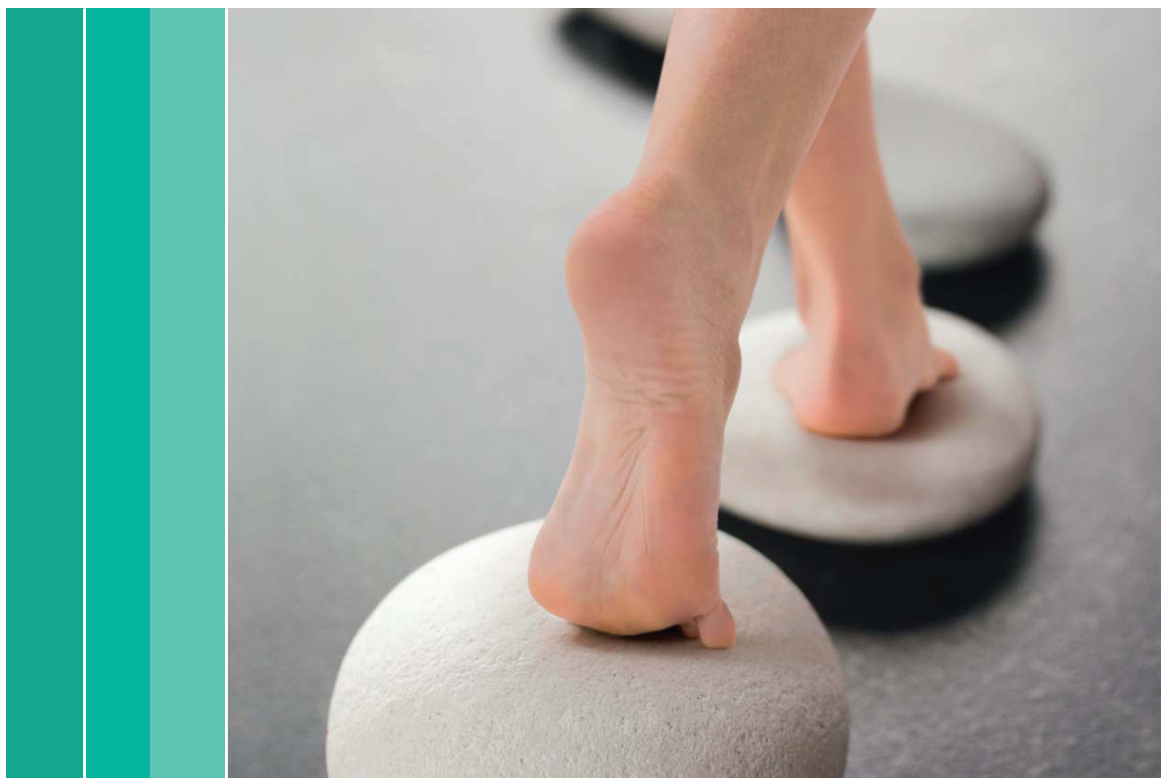

CWT
CHRONIC WOUND TREATMENT

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

יבוא ושיווק: C.W.T - טיפול בפצעים כרוניים בע"מ, הגפן 84 מושב גמזו
טלפון: 08-9287778 | www.cwt.org.il | info@cwt.org.il



יבוא ושיווק: C.W.T - טיפול בפצעים כרוניים בע"מ, הגפן 84 מושב גמזו
טלפון: 08-9287778 | www.cwt.org.il | info@cwt.org.il

Askina® Foam



חבישת קצף לספיגת הפרשות בכמות בינונית עד גבוהה במיוחד עם או ללא שוליים דביקים
התוויה:

פצעים שטחיים ועמוקים עם הפרשה בינונית-גבוהה
 משמשת כחבישה משנית

תיאור המוצר:

חבישת FOAM לספיגת הפרשות וכליאתם בחבישה תוך שמירה על סביבת פצע לחה. ללא חשש למסרציה החבישה מורכבת משתי שכבות:
 (1) פוליאוריתן הידרופילי נושם בעל יכולת ספיגה גבוהה.
 (2) שכבת הגנה עליונה ודקה אינה חדירה למים ומזהמים חיצוניים
 החבישה ללא שוליים דביקים ניתנת לגזירה

מגיעה במספר תצורות אנטומיות ייחודיות:

ASKINA® TRACHEA - מיועדת לספיגת הפרשות מטרנכאה, נקזים ו- PEG
 ASKINA® HEEL - מותאמת למבנה אנטומי עגול (עקב, מרפק, אשכים)
 ASKINA® SACRUM - מותאמת לסקרום ולטרוכנר

אופן השימוש:

- (1) יש לגזור את החבישה בהתאם לגודל הפצע (רק חבישות ללא שוליים)
- (2) יש להניח את הצד הסופג על מיטת הפצע ובמידת הצורך לקבע את החבישה.
- (3) להשאיר בהתאם לכמות ההפרשה ועד 7 ימים.

BR007/01 FEB.-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA FOAM 10X10CM	10	15843	1000055695	15843		682222	3800411010
ASKINA FOAM 10X20CM	10	81435	1000067248	81435	D78105		3800411017
ASKINA FOAM 20X20CM	5	56778					
ASKINA FOAM BORDER 16X16CM	10	8121	1000067246			682221	3100215496
ASKINA FOAM BORDER SACRUM 18x20CM	5	15844	1000055688				
ASKINA HEEL 225CM	5	81441	1000055689		D78100		
ASKINA TRACHEA 9.5X8.5CM	10	81438	1000055690		D90083	682244	
ASKINA FOAM CAVITY 2.5X4CM	10	81436					

Askina® Biofilm Transpernt



חבישה הידרוקולואידית דקה, שקופה וסטרילית, בעלת יכולת ספיחה של הפרשה מועטה תוך שמירה על לחות בסביבת הפצע

התוויה:

פצעים בשלב האפיטליזציה עם הפרשה מועטה וקרעי עור משמשת גם כחבישה משנית.

תיאור המוצר:

דקה וגמישה מתאימה לקימורי הגוף, שקופה, מאפשרת בקרה על החלמת הפצע, אינה חדירה למים, שומרת על לחות הפצע ומגנה בפני מזהמים.

אופן השימוש:

- 1) יש לבחור בגודל מתאים כך שיישארו 2-3 ס"מ מסביב לשולי הפצע- החבישה ניתנת לגזירה
- 2) יש להסיר את הנייר המגן המודפס
- 3) יש להצמיד את הצד הדביק למיטת הפצע
- 4) יש להסיר את שכבת ההגנה החיצונית
- 5) יש לוודא שהחבישה נדבקה, אין צורך בקיבוע נוסף
- 6) ניתן להשאיר בהתאם לכמות ההפרשה ועד 7 ימים

BR008/01 FEB.-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA BIOFILM TRANSPARENT 10X10CM	10	81445	1000055696				3800411087
ASKINA BIOFILM TRANSPARENT 15X15CM	10	81446	1000055691				
ASKINA BIOFILM TRANSPARENT 20X20CM	10	81447	1000055692				

Askina® Barrier



קו מוצרי סיליקון להגנה על העור

התוויה:

מיועד לשימוש על עור בריא או פגום בדר"כ בשולי פצע או סביב סטומה, צינורות ניקוז וצנתרים.

תיאור המוצר:

חבישה נוזלית מבוססת סיליקון שיוצרת שכבה שקופה ונושמת במגע עם העור. נטולת אלכוהול ולכן אינה צורבת או גורמת לאי נוחות על העור.

ספריי - משמש כשכבת הגנה נגד גירוי מנוזלי גוף, מתחת לחבישה דביקה כדי להפחית את ההפר-
עה לרקמה המתחדשת. מתאים במיוחד לאזורים סביב סטומה, צינורות ניקוז וצנתרים
קרם או מוטוש - מונע מסרציה הנגרמת על ידי אי שליטה על סוגרים. מנן על עור רגיש ושביר, עור
יבש וקשה במיוחד כולל אזורים לפני היווצרות פצע.

מגיעה במספר תצורות:

- ASKINA® BARRIER FILM SPRAY
- ASKINA® BARRIER FILM SWAB
- ASKINA® BARRIER FILM CREAM

BR034/01 FEB.-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA BARRIER FILM 28 ml SPRAY	12	54730		54730			
ASKINA BARRIER FILM 28 ml SPRAY	1	3857		3857			
ASKINA BARRIER FILM 1 ml SWAB	5	54739					
ASKINA BARRIER FILM 1 ml SWAB	1	56777					
ASKINA BARRIER FILM CREAM 28 g	1	54749					
ASKINA BARRIER FILM CREAM 92 g	1	54725					

Askina® Hydro



חבישה הידרוקולואידית עבה מהדור החדש, עם יכולת ספיגת הפרשות גבוהה

התוויה:

פצעים בשלב האפיטליזציה עם הפרשה מועטה וקרעי עור משמשת כחבישה משנית.

תיאור המוצר:

יכולת ספיגה לזמן ארוך, ספיחה גבוהה באמצעות הג'ל בחבישה 5-7 ימים. מסייעת בהפחתת ריח.


אופן השימוש:

- 1 יש לבחור בגודל מתאים כך שיישארו 2-3 ס"מ מסביב לשולי הפצע- החבישה ניתנת לגזירה
- 2 יש להסיר את נייר המגן המודפס
- 3 יש להצמיד את הצד הדביק למיטת הפצע
- 4 יש לוודא שהחבישה נדבקה, אין צורך בקיבוע נוסף
- 5 החלפת החבישה תתבצע לאחר 5-7 ימים לכל היותר או כאשר נוצרת בועה לבנה בגודל הפצע

BR035-01 FEB-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA HYDRO 10X10CM	10	81444					3800411080
ASKINA HYDRO 15X15CM	10	81442					3800411066
ASKINA HYDRO 20X20CM	10	81443					

Askina® Calgitrol

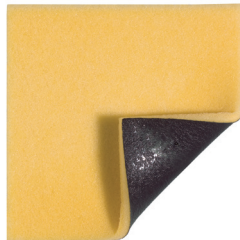

חבישות ופסטה המשלבות יוני כסף

התוויה:

פצעים מזוהמים שטחיים או עמוקים עם הפרשה מועטה עד מרובה.

תיאור המוצר:

שילוב יוני כסף עם קלציום אלגינט העובדים מידית על הפצע ללא צורך בשפעול ע"י לחות. אפקט אנטיבקטריאלי מיידי והגעה ל-60 ppm תוך יממה ושמירה על ערך זה 7 ימים.

מגיעה במספר תצורות:

- ASKINA® CALGITROL Ag - חבישת קצף משולבת עם יוני כסף. מאפשרת ספיגה הפרשות - אין צורך בחבישה משנית סופגת.
- ASKINA® CALGITROL THIN - חבישה רשתית עם יוני כסף ללא כושר ספיגה, ניתנת לשימוש מתחת לחבישה סופגת ועל פצע יבש ללא חשש להידבקות - יש צורך בחבישה משנית.
- ASKINA® CALGITROL PASTE - פסטה עם יוני כסף ניתנת לשימוש בפצעים עמוקים ומחילות

אופן השימוש לחבישות:

- 1 יש לבחור בגודל מתאים כך שיישארו 2-3 ס"מ מסביב לשולי הפצע. החבישה ניתנת לגזירה.
- 2 יש להניח את החבישה עם צד הכסף (הכהה) כלפי הפצע
- 3 CALGITROL THIN יש לקבע את החבישה באמצעות חבישה משנית או פלסטר


אופן השימוש לפסטה:

- 1 יש למרוח שכבה של 2-3 ס"מ על כל מיטת הפצע. בפצעים עמוקים למלא את החלל, ניתן להעזר במזרק.
 - 2 במידת הצורך לכסות עם חבישה משנית סופגת
- החלפת החבישה בהתאם לכמות ההפרשה ועד 7 ימים

BR033/01 FEB.-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA CALGITROL AG 10 X 10 CM	10	81431					3800410989
ASKINA CALGITROL AG 15 X 15 CM	10	81432					3800410996
ASKINA CALGITROL AG 20 X 20 CM	10	81433					
ASKINA CALGITROL THIN 5 X 5 CM	10	48956					
ASKINA CALGITROL THIN 10 X 10 CM	10	48958					
ASKINA CALGITROL THIN 10 X 20 CM	10	48960					
ASKINA CALGITROL THIN 20 X20 CM	10						
Askina® Calgitrol® Paste 15 g	5						
Askina® Calgitrol® Paste 15 g	10	82364					
Askina® Calgitrol® Paste 100 g	1						

Askina® Sorb

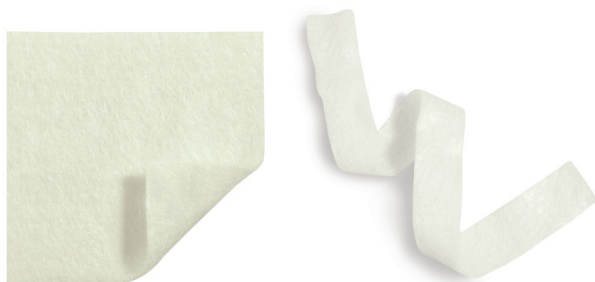

חבישת אצות

התוויה:

פצעים שטחיים ועמוקים בעלי הפרשה בינונית-גבוהה

תיאור המוצר:

נוסחה חדשנית עם מבנה רשת, המעניקה יכולת ספיגה גבוהה יותר והפיכה לג'ל שאינו מתפרק בעת ההסרה ושאינו גורם לטראומה בתוך הפצע ולכאבים בהסרת החבישה. ללא חשש למסרציה בשולי הפצע. אריזה סטרילית.

תצורות ייחודיות נוספות:

• **ASKINA® SORB ROPE** - חבישת אצות בצורת שרוך מיועד למחילות

אופן השימוש:

- (1) יש לגזור בהתאם לגודל הפצע כך שיישארו 2-3 ס"מ מסביב
- (2) יש להניח את החבישה ולקבע את החבישה באמצעות חבישה משנית
- (3) שימוש עד שהחבישה הופכת לג'ל.

BR028-01 FEB.-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA SORB 6X6CM	15	81427					
ASKINA SORB 10X10CM	15	81428					3800410968
ASKINA SORB 15X15CM	10	81429					3800410975
ASKINA SORB ROPE 34X2.7CM	10	81430					3800410982

Askina® DresSil חדש



חבישת סילקון + Foam דביקה עם או ללא שוליים דביקים

התוויה:

פצעים שטוחים ועמוקים עם הפרשה בינונית-גבוהה אידאלי לאזור תורם שימוש כחבישה משנית

תיאור המוצר:

מורכבת משלוש שכבות:

- (1) ציפוי הגנה מפוליאוריתן נושם המספק הגנה מנוזלים ומזהמים חיצוניים
- (2) שכבת קצף הידרופילית רכה נוחה בעלת כושר ספיגה גבוה
- (3) שכבת סיליקון דביקה מחוררת המאפשרת מעבר הפרשות, הדבקה בטוחה והסרה אט-ראומטית ללא חשש לפגיעה בגרנולציה והאפטליזציה.

מגיעה גם במספר תצורות אנטומיות ייחודיות:

- ASKINA® DRESSIL HEEL - מותאמת למבנה אנטומי עגול (עקב, מרפק, אשכים)
- ASKINA® DRESSIL SACRUM - מותאמת לסקרום ולטרוכנטר

אופן השימוש:

- (1) יש לבחור בגודל מתאים כך שיישארו 2-3 ס"מ מסביב
- (2) אין צורך בקיבוע נוסף (גם החבישה ללא שוליים נצמדת לפצע באופן מיטבי)
- (3) להשאיר בהתאם לכמות ההפרשה ועד 7 ימים

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA DRESSIL 5X7CM	10	56770					
ASKINA DRESSIL 10X10CM	10	48970					
ASKINA DRESSIL 15X15CM	10	56767					
ASKINA DRESSIL 10X20CM	10	48971					
ASKINA DRESSIL 20X20CM	5	56768					
ASKINA DRESSIL BORDER 6X6CM	10	82357					
ASKINA DRESSIL BORDER 7.5X7.5CM	10	56775					
ASKINA DRESSIL BORDER 10X10CM	3	56772					
ASKINA DRESSIL BORDER 10X10CM	10	56771					
ASKINA DRESSIL BORDER 15X15CM	10	56773					
ASKINA DRESSIL BORDER 20X20CM	5	56774					
ASKINA DRESSIL SACRUM 16X17.5CM	5	56776					
ASKINA DRESSIL HEEL 22X21.6CM	5	82395					

Askina® Silent חדש



חבישה רשתית עשויה מסיליקון

התוויה:

בידוד בין פצע לחבישה משנית למניעת הדבקה וכן לאזורים תורמים

תיאור המוצר:

עשויה מחומר נוח וקל להתאמה לא ארוג, מצופה משני הצדדים בשכבת סיליקון רכה. החבישה משמשת כשכבת הגנה לפצע המתאימה את עצמה למבנה שטח הפנים של הפצע ונדבקה בצורה בטוחה לעור שמסביבו. אין מסרציה - העברת נוזלים אנכית, היפואלרגנית (לא מכיל תוצרי נפט), ניתן להסיר ולמקם שוב.

אופן השימוש:

- 1 יש לבחור חבישה בגודל המתאים- ניתן לגזור ולהתאים לשטח הפצע
- 2 יש להסיר את שכבת הפלסטיק המגנה
- 3 יש להניח את החבישה על מיטת הפצע ואז להסיר את שכבת הפלסטיק השנייה
- 4 יש להניח חבישה משנית סופגת כדוגמת Askina® Foam
- 5 להשאיר בהתאם לכמות ההפרשה ועד 7 ימים.

BR006/01 FEB.-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA SILNET 5 X 7.5 CM	10	56764					
ASKINA SILNET 10 X 7.5 CM	10	48963					
ASKINA SILNET 10 X 18 CM	10	48969					
ASKINA SILNET 20 X 30 CM	5	56765					

Askina® Transorbent



חבישת קצף דביקה בשילוב עם הידרוג'ל עם או ללא שוליים דביקים

התוויה:

פצעים שטוחים ועמוקים נקיים ונקרוטיים עם או בלי הפרשות.

תיאור המוצר:

מסייעת בהטריה אוטוליטית, מתן לחות ויכולת ספיגת הפרשות מורכבת מארבע שכבות:

- (1) שכבת פוליאוריתן עליונה להגנה ממים וממזהמים חיצוניים
- (2) שכבת קצף לכליאת הפרשות הפצע
- (3) שכבת הידרוג'ל יבש לספיחת ההפרשות ומתן לחות לפצע
- (4) שכבת דביקה על מיטת הפצע

מניעה במספר תצורות:

- ASKINA® TRANSORBENT BORDER - עם שוליים
- ASKINA® TRANSORBENT SACRUM - מותאמת לסקרום


אופן השימוש:

- (1) יש לגזור את החבישה בהתאם לגודל הפצע ולהשאיר לפחות 3 ס"מ מסביב להידבקות מיטבית
- (2) יש להסיר בעדינות חצי מכיסוי החבישה מצד אחד ואז עם תנועות החלקה להדביק את החבישה תוך הסרת הכיסוי השני.
- (3) יש להחליק עם היד על החבישה על מנת לוודא שהיא נדבקה בצורה מלאה.
- (4) אין צורך בחבישה משנית
- (5) להשאיר בהתאם לכמות ההפרשה ועד 7 ימים

BR029/01 FEB.-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA TRANSORBENT 5X7CM	10						
ASKINA TRANSORBENT 10X10CM	10	81423					3800410933
ASKINA TRANSORBENT 15X15CM	10	81424					3800410940
ASKINA TRANSORBENT 20X20CM	10						
ASKINA TRANSORBENT BORDER 9X14CM	10	81422					
ASKINA TRANSORBENT BORDER 9X14CM	5						
ASKINA TRANSORBENT BORDER 14X14CM	5						
ASKINA TRANSORBENT BORDER 17X17CM	5						
ASKINA TRANSORBENT BORDER 24X24CM	5						
ASKINA TRANSORBENT SACRUM 18X20CM	5	81421					

Askina® Absorb+ חדש

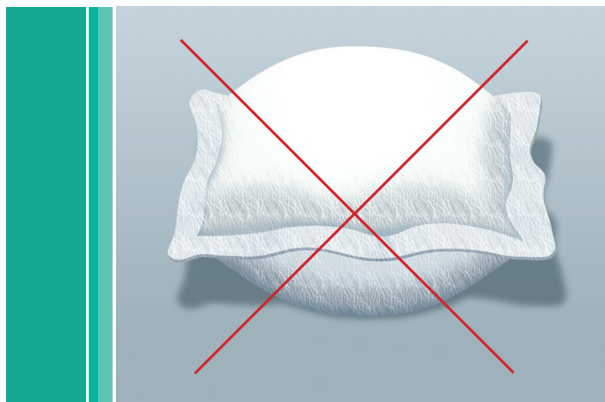

חבישה עם כושר ספיגה גבוה במיוחד וארוך טווח, כולאת כמות גדולה של הפרשות וחידקים.

התוויה:

משמשת כחבישה ראשונית או משנית

תיאור המוצר:

מורכבת מפד פנימי עשוי מסיבים פולימרים עטוף בכיס חיצוני ארוג (3 מרכיבים מיובשים כחומר אחד). במגע עם הפרשות הפצע, הנוזל הופך לג'ל רך וגמיש. לא נדבקת לפצע ואין אפקט של ספוג. החבישה אינה מכילה אבקה ולכן אין חשש להתגבשות של ג'ל סביב חלקיקים שחוסמים את המרחק הספיגה וכך, פנים החבישה נשאר יבש לאורך זמן גם כאשר החבישה ספוגה בהפרשות. אין חשש למסרציה בשולי הפצע.


אופן השימוש:

- (1) יש לבחור בגודל מתאים כך שיישארו 2-3 ס"מ מסביב. ניתן לשים מספר חבישות זו לצד זו, לכיסוי פצע גדול
 - (2) יש לקבע עם חבישה משנית
 - (3) להשאיר בהתאם לכמות ההפרשה ועד 5 ימים.
- * ניתן להשתמש תחת חבישת לחץ

BR032/01 FEB.-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
Askina Absorb+ 10x10CM	10	54723					
Askina Absorb+ 10x20CM	10	54724					
Askina Absorb+ 20x20CM	5	71814					

Askina® Gel

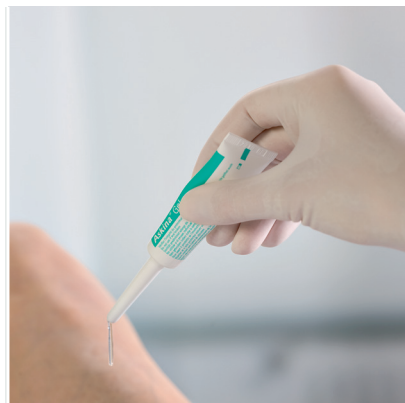

הידרוג'ל: מים סטריליים, גליצרול, ג'ל ופולימר אקרילי.

התוויה:

פצעים יבשים ונקרוטים, פצעים עם הפרשה מועטה.

תיאור המוצר:

מרקם ג'ל שקוף צמיגי ומרוכז במיוחד המקנה לחות מתמשכת לפצע ומסייע בהטרייה אוטוליטית.

אופן השימוש:

- (1) יש למרוח על מיטת הפצע ו/או למלא את חלל הפצע
- (2) יש צורך בחבישה משנית בהתאם לבחירת המטפל
- (3) החלפה בהתאם לכמות ההפרשות

BR031/01 FEB-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA GEL 15g	10	81420					3800410912
ASKINA GEL 100g	1						

Askina® Thinsite



חבישה דקה במיוחד עם גמישות מקסימלית להתאמה מדויקת לאיברי הגוף.

התוויה:

לקרעי עור, פצעים יבשים עד הפרשה מועטה וכן לאזורים אנטומיים בעיתיים לאטימה. משמשת גם כחבישה משנית

תיאור המוצר:

חבישה דקה במיוחד (1 מ"מ) בעלת גמישות גבוהה ויכולת התאמה למתארים אנטומיים כגון עכוז, הפרדה בין האצבעות ועוד


אופן השימוש:

- 1) יש לבחור בגודל מתאים כך שיישארו 2-3 ס"מ מסביב לשולי הפצע- החבישה ניתנת לגזירה
- 2) יש להסיר את נייר המגן המודפס
- 3) יש להצמיד את הצד הדביק למיטת הפצע
- 4) יש לוודא שהחבישה נדבקה, אין צורך בקיבוע נוסף
- 5) החלפת החבישה תתבצע לאחר 4 ימים לכל היותר או בהתאם לכמות ההפרשה

BR030/01 FEB.-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA THINSITE 10X10CM	10	81425					3800410947
ASKINA THINSITE 15X15CM	10	81426					3800410954
ASKINA THINSITE 20X20CM	5	67444					

Askina® Derm

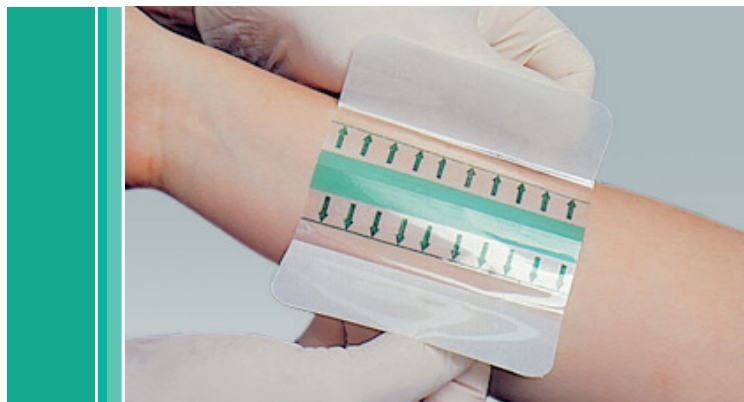

חבישה סטרילית, נושמת ושקופה.

התוויה:

פצעים ללא הפרשה **כגון**: חתכי ניתוח, כוויה דרגה ראשונה, סדקים בעור, קיבוע חבישות, נקזים, עירוי.

תיאור המוצר:


חבישה נדבקת, הסרה אטראומטית, אינה חדירה לנוזלים, נושמת, מגנה על העור. משמשת גם לקיבוע משני.

אופן השימוש:

1. יש לבחור בגודל מתאים כך שיישארו 2-3 ס"מ מסביב לשולי הפצע
2. יש להסיר את שכבת המגן התחתונה ולהצמיד לפצע
3. יש להסיר את שכבת המגן העליונה לצורך קיבוע סופי.
4. החלפת החבישה תתבצע לאחר 7 ימים או בעת החלפת החבישה הראשונית בהתאם להתוויה.

BR036/01 FEB.-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA DERM 6X7CM	100	85685					
ASKINA DERM 10X12CM	10	81448					
ASKINA DERM 10X12CM	50	63304					
ASKINA DERM 10X20CM	10	3736					
ASKINA DERM 15X20CM	10	81449					
ASKINA DERM 20X30CM	10	3820					



יבוא ושיווק: C.W.T - טיפול בפצעים כרוניים בע"מ, הגפן 84 מושב גמזו
טלפון: 08-9287778 | www.cwt.org.il | info@cwt.org.il