


Askina® Calgitrol

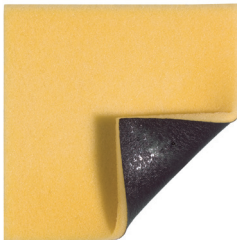

חבישות ופסטה המשלבות יוני כסף

התוויה:

פצעים מזוהמים שטחיים או עמוקים עם הפרשה מועטה עד מרובה.

תיאור המוצר:

שילוב יוני כסף עם קלציום אלגינט העובדים מידית על הפצע ללא צורך בשפעול ע"י לחות. אפקט אנטיבקטריאלי מיידי והגעה ל-60 ppm תוך יממה ושמירה על ערך זה 7 ימים.

מגיעה במספר תצורות:

- ASKINA® CALGITROL Ag - חבישת קצף משולבת עם יוני כסף. מאפשרת ספיגה הפרשות - אין צורך בחבישה משנית סופגת.
- ASKINA® CALGITROL THIN - חבישה רשתית עם יוני כסף ללא כושר ספיגה, ניתנת לשימוש מתחת לחבישה סופגת ועל פצע יבש ללא חשש להידבקות - יש צורך בחבישה משנית.
- ASKINA® CALGITROL PASTE - פסטה עם יוני כסף ניתנת לשימוש בפצעים עמוקים ומחילות

אופן השימוש לחבישות:

- 1 יש לבחור בגודל מתאים כך שיישארו 2-3 ס"מ מסביב לשולי הפצע. החבישה ניתנת לגזירה.
- 2 יש להניח את החבישה עם צד הכסף (הכהה) כלפי הפצע
- 3 CALGITROL THIN יש לקבע את החבישה באמצעות חבישה משנית או פלסטר

אופן השימוש לפסטה:

- 1 יש למרוח שכבה של 2-3 ס"מ על כל מיטת הפצע. בפצעים עמוקים למלא את החלל, ניתן להעזר במזרק.
 - 2 במידת הצורך לכסות עם חבישה משנית סופגת
- החלפת החבישה בהתאם לכמות ההפרשה ועד 7 ימים

BR033/01 FEB.-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA CALGITROL AG 10 X 10 CM	10	81431					3800410989
ASKINA CALGITROL AG 15 X 15 CM	10	81432					3800410996
ASKINA CALGITROL AG 20 X 20 CM	10	81433					
ASKINA CALGITROL THIN 5 X 5 CM	10	48956					
ASKINA CALGITROL THIN 10 X 10 CM	10	48958					
ASKINA CALGITROL THIN 10 X 20 CM	10	48960					
ASKINA CALGITROL THIN 20 X20 CM	10						
Askina® Calgitrol® Paste 15 g	5						
Askina® Calgitrol® Paste 15 g	10	82364					
Askina® Calgitrol® Paste 100 g	1						