

Actreen® Mini Cath

اکترین® مینی کاتھ

Actreen® Mini Cath אקטרין® מיני קת'




אקטרין® מיני קת' הינו צנתר סטרילי מסוכך ומוכן לשימוש.

התוויה: מיועד לצנתור עצמי לסירוגין, לטיפול באצירת שתן ואי שליטה במתן שתן בנשים.
התווית נגד: בעת הפקת עלון זה לא ידועה על התווית נגד.

הוראות שימוש

הכנה:

1. לפני הפתיחה, יש לבדוק שהמוצר שלם ולוודא שחומר הסיכה מפוזר באופן אחיד על פני הצנתר (בדיקה ויזואלית ובאמצעות מגע).
2. יש לשטוף את הידיים בהקפדה יתרה לפני ואחרי הצנתור, ויש לשטוף את אזור איברי המין ודרכי השתן.
3. יש להסיר את כיסוי המגן שעל הצד, הכולל את החלק המחובר של הצנתר על-ידי קריעה במקום המסומן ב- א.
4. יש לאחוז את הצנתר בחלק המחובר כדי להוציאו מתוך כיסוי המגן ללא מגע בצנתר עצמו. ב.

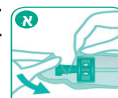

תהליך הצנתור:

5. עם ידי אחת, יש להפריד את שפתי הפות, ועם היד השנייה, יש להחדיר בעדינות את הצנתר דרך פתח השופכה לתוך השופכה וככלי מעלה לשלפוחית השתן, עד ששתן מתחיל לזרום. ג.
6. לחץ ידני על החלק התחתון של הבטן לקראת סוף תהליך הצנתור יבטיח ששלפוחית השתן תתרוקן לחלוטין.
7. כאשר שלפוחית השתן ריקה לחלוטין, יש למשוך בעדינות את הצנתר החוצה.
8. בשלב זה ניתן להחזיר את הצנתר באופן דיסקרטי לכיסוי המגן ולהשליכו בהתאם לנהלים המקומיים הנוכחיים. ד.



אקטרין® מיני קת' ניתן לחיבור לשקית איסוף שתן כגון שקית יורמד® של חברת ב. בראון.

אזהרה:

- ⚠ צנתור עצמי חייב להתבצע רק בייעוץ רפואי ורק בהתאם להנחיות הניתנות.
- ⚠ שימוש חוזר באביזרים המיועדים לשימוש חד-פעמי עלול לסכן את המטופל או המשתמש. הוא עלול להוביל לזיהום ו/או לפגיעה ביעילות. זיהום ו/או יעילות מוגבלת של האביזר עלולים לגרום לפציעה, למחלה או למוות של המטופל.

⚠ אין להשתמש אם האריזה פתוחה או פגומה.

אמצעי אחסון: יש לאחסן את המוצר במקום ללא לחות ושמש ישירה, זמן מדף שנתיים.