


Urimed®

בטופ...DISKERTI ומכון לשימוש

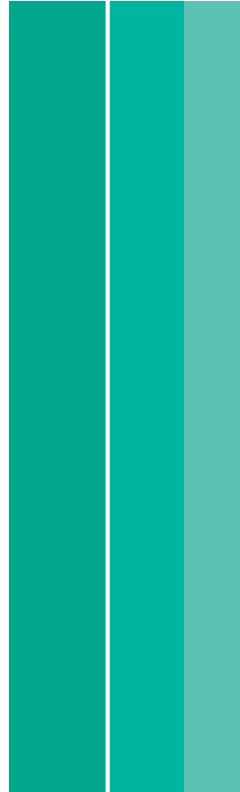

הוראות שימוש Urimed

- שקיות שתן
- קונדום פתוח (פנרגז)
- ציוד נלווה

חדש
ישראל

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

PHAR MIDAS

Urimed®

בטוח...דיסקרטי וモוכן לשימוש




Urimed Handle מתקלה לשקיית שתן

מתקלה המאפשר תליה
של השקיית
של ברוז



Urimed fix וירימד פיקס

ראשת המצמידה את שקיית
השתן לרג'ל בנוחות ובטיחות
מייבכית.

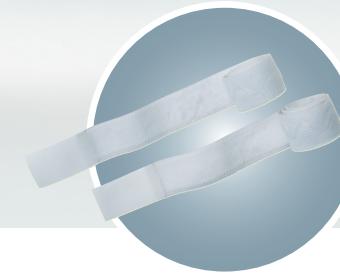

רצועות אלסטיות להצמדת שקיית השתן לרג'ל

זוג רצועות גמישות המתחרבות
לשקיית השתן ומצמידות את
סקיית השתן לרג'ל, סותאמות
אישיית וניננות רחצה ושיפוש
חוואר.

Urimed Medicare bag 2L סקיית שתן כנפוח של 2 ליטר עם ברוז

- ניתן להשיג קשייה סטרילית / לא סטרילית
- שסתום אל חזיר
- צינורית אורך 90 ס"מ



Urimed Bag Plus 0.5L וירימד שקיית שtan נצמדת לרג'ל עם ברוז

- שקיית שtan נצמדת לרג'ל עם ברוז.
- חומר עדין ורך בחלוקת האחורי של השקיית הבא במגע
עם העור פונע גירויים ועל תחושה נוחה ונעימה.
- מגיעה בנפח של 500 מ"ל.
- בעלת שסתום חד ציווני.
- אורך צינורית 60 ס"מ. הצינורית אינה מתקפלת ואנייה
אפשרה את עצירת זרימת הרשות לשקיית. בקוטר
שמבטייח זרימה רציפה של השtan.
- קללה לשימוש ומתחילה גם לאנשים עם פגיעה
בחנווניות ידיים. (ניתן לרכיב ביד אחת)
- מתאימה לחיבור עם צנתרים מכל הסוגים,
קנדום פתוח/פנroz,
ושקיית אורוסטומס.



Urimed Tribag Plus 0.8L וירימד שקיית שtan נצמדת לרג'ל

- שקיית שtan נצמדת לרג'ל במבנה שלושה תאים בצד'
- לאפשר הצמדה נוחה לרג'ל ושמירה על דיסקרטיות.
- חומר עדין ורך בחלוקת האחורי של השקיית הבא במגע
עם העור פונע גירויים ועל תחושה נוחה ונעימה.
- מגיעה בנפח של 800 מ"ל.
- בעלת שסתום חד ציווני.
- אורך צינורית 60 ס"מ. הצינורית אינה מתקפלת ואנייה
אפשרה את עצירת זרימת הרשות לשקיית. בקוטר
שמבטייח זרימה רציפה של השtan.
- קללה לשימוש ומתחילה גם לאנשים עם פגיעה
בחנווניות ידיים. (ניתן לרכיב ביד אחת)
- מתאימה לחיבור עם צנתרים מכל הסוגים, קנדום פתוח/
פנroz, וסקיית אורוסטומס.



Urimed®

בטווח...דיסקרטי ומוסכו לשימוש

סדרת מוצרי יורימד



מספר ר'פוא	קיד	מארז'	סטט'	שם המוצר	תאורה
11648	28114	10		Urimed Medicare bag 2l	
11651	28115	10		Urimed Medicare bag 2l sterile	
11657	28306	10		Urimed Tribag Plus non-sterile, 800 ml	
11659	28501A	10		Urimed Bag Plus 0.5L	
	6855110	10		Urimed Strap	
15121	68548R	50		Urimed Handle	



הוראות שימוש שקיית שחטן נצמדת לרגל:

- .1 יש לשטוף ידיים במים וסבון
- .2 הוציאי את השקיית מהאריזה
- .3 יש להתחאמים את אורך הצינורית ולגזרו/לחותור לאורך הרצוי.
- .4 יש לחבר את המחבר (קונקטור) לצינורית. (חשוב לשם לב כי לאחר חיבור המחבר אין אפשרות לנתקו בשנית).
- .5 יש להשליל את הרצעות בחולק העליון והתחתיו של השקיית כר שהצד עם הסיליקון כלפי העור. הרצעות אלסטיות ונitinנות למיתחה סכיב השוק או הירך. הסגירה באמצעות הפס הנצמד. הרצעות ניתנות לרוחיצה ושימוש חוזר.
- .6 את המחבר יש לחבר לצנתר הקבוע או לקונדום פתוח/פנרווז.
- .7 בחלקה התחתית של השקיית מצוי ברץ לריקון השקיית.
- .8 ניתן להשתמש בשקיית עד שבוע ימים

מספר	תאורה	פרמטרים	ס.מ' י.ח'	ברזיה	קיד. יופא
15123	Urimed Vision Standard, 25 mm	IH2525A	30		
15124	Urimed Vision Standard, 29 mm	IH2529A	30		
15125	Urimed Vision Standard, 32 mm	IH2532A	30		
15127	Urimed Vision Standard, 36 mm	IH2536A	30		
15128	Urimed Vision Standard, 41 mm	IH2541A	30		

- אזהרה:**
- השימוש בפנroz הינו חד פעמי
 - אין להשתמש במקרה של הופעת אלרגיה או רגישות בעור הפין

אלgal את הפנroz כלפי מטה והסר אותו מהפין. שטוף את הפין באמצעות ספוג עדין ומים פושרים, נגב היבש.

הסרת הקונדום:

- galgal את הפנroz הנדבק מעצמו לאזור הפין.
 2. הדק בעדינות את הפנroz וודא הדבקתו לעור.
 3. תגאג עיילות ההדבקה.
 4. אין למסח קרם או לפזר טלק על אזור הפין, פעולה זו
 5. גלגל את הפנroz הנדבק מעצמו לאזור הפין.
 6. חבר את שקיית השתן.
 7. שקיית השתן.

הוראות שימוש בקונדום פתוח/פנroz Urimed Vition



Urimed® Vision Standard

ירimed ויז'ון סטנדרט קונדום פתוח/פנroz

- קונדום פתוח/פנroz סיליקון מהוועה פתרון דיסקרטי לא פולשני לדילפת שtan בגברים.
- הקנדום מתחבר לכל סוג המתחברים של שקיות לאיסוף שtan.
- 5 גדים 25 ס"מ - 41 ס"מ
- אורגד 7.5 ס"מ
- עשוי סיליקון היפו אלרגי, וסיכון נמוך למיצריה - מסקוק העור(יש מעבר גדים ואידי נזוליהם), סונג גירויים.
- יש להחליף אחת ל-24 שעות
- ללא לנטקס
- דביך ונמצמד לעור
- שקוף כך שאפשר לעpid את מצב העור
- 30 י.ח' בברזיה

Urimed®

בטוח...דיסקרטי וモוכן לשימוש



חברת B.Braun הינה חברת גרמנית בינלאומית המפתחת,
מייצרת ושיווקת תרופות וציוד רפואי.

חברת B.Braun באיכות נציגתה בישראל, מבטיחה לחלק עם
לקוחותיה את הדעת הרפואי והkompetenzen שלה לטבות תחום
הבריאות, הוצאות הרפואי והמטופלים.
הדילוג עם הלקוחות שנעשה באופן רציף ועקבני,
חשוב מאד לחברת זאת לצורך פיתוח מוצרים חדשים.

בישראל, תחום האורולוגיה של B.Braun משוויך ע"י
חברת ארטמיזאנס בע"מ (חברה בת של CWT).
אנו מיבאים את היצור ומתפקידם בייצור צוותים מקצועיים
תפיכה ושירות לקוחותינו. במסגרת השירות, עומד לרשות
לקוחותינו צוות אחויות ייעודי המספק הדרכה על המוצרים
גם בבית הלון בהתאם לצורך. בנוסף, מענה טלפון
וחופר הסברה זמן עכורכם בכל עת.

נשמח לעמוד לשירותך בכל שאלה.
שירות לקוחות: 08-9287778 דוא"ל: info@cwt.org.il
www.actreen.com

החברת הופקה ע"י חברת פארמידס מייצגת B.Braun כל הזכויות שמורות ©

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

PHAR MIDAS