


Actreen® Hi-Lite

اکترین® های لایت

Actreen® Hi-Lite אקטרין® היי-לייט

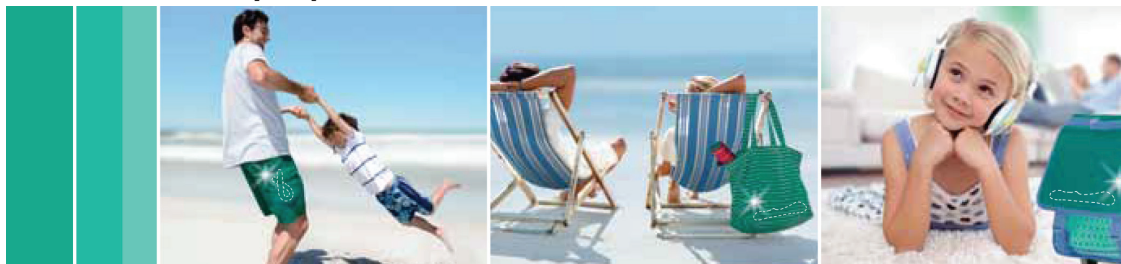

אקטרין® היי-לייט צנתר סטרילי מסוכך ומוכן לשימוש



התוויה: מיועד לצנתור עצמי לסירוגין. לטיפול באצירת שתן ואי שליטה במתן שתן התווית נגד: בעת הפקת עלון זה לא ידוע על התווית נגד.

הוראות שימוש

יש לשטוף את הידיים בהקפדה יתרה לפני ואחרי הצנתור, ויש לשטוף את אזור איברי המין ודרכי השתן.

הכנה:

1 - יש להסיר את כיסוי המגן הנמצא בצד של החלק המחובר.

על ידי קריעת הכיסוי במקום המסומן ב- "1"



2 - יש לשחרר את קצה הצנתר

במקום המסומן ב- "A" עבור צנתור בשיטת "ללא מגע" על-ידי קיפול הכיסוי לאחור.



במקום המסומן ב- "C-B" כדי לשחרר את הכיסוי הניתן להזזה עבור שיטת "ללא מגע" פשוטה יותר.



במקום המסומן ב- "C" כדי להסיר את כל הכיסוי ולשחרר את הצנתר לכל אורכו.

גברים:

- יש לאחוז עם יד אחת את הפין כלפי מעלה כדי להפחית את קימור השופכה.
- יש להכניס עם היד השנייה בזהירות את הצנתר לתוך השופכה עד שיגיע לשלפוחית השתן והשתן יתנקז.
- עבור צנתר טיימן: כדי לכוון את הצנתר בצורה נכונה, אנא ישר את הסימון שעל החלק המחובר כיאות.



נשים:

- יש להפריד עם יד אחת את השפתיים הגדולות של הנרתיק כדי לאתר את פתח השופכה. יש להכניס עם היד השנייה בזהירות את הצנתר לתוך השופכה עד שיגיע לשלפוחית השתן והשתן יתנקז.



לחץ ידני על החלק התחתון של הבטן לקראת סוף תהליך הצנתור יבטיח ששלפוחית השתן תתרוקן לחלוטין. כאשר שלפוחית השתן ריקה לחלוטין, יש למשוך בעדינות את הצנתר החוצה. כדי להפסיק את הטפטוף מהצנתר ניתן לכוון כלפי מעלה את קצה החלק המחובר של הצנתר בעת הוצאתו. לאחר מכן, יש להשליך את הצנתר בהתאם לנהלים המקומיים הנוכחיים. צנתור עצמי חייב להתבצע רק ביעוץ רפואי ורק בהתאם להנחיות הניתנות.

אמצעי זהירות

אזהרה: אין להשתמש אם האריזה פתוחה או פגומה. אזהרה: שימוש חוזר באביזרים המיועדים לשימוש חד-פעמי עלול לסכן את המטופל או המשתמש. שימוש כזה עלול להוביל לזיהום ו/או לפגיעה ביעילות. זיהום ו/או יעילות מוגבלת של האביזר עלולים לגרום לפציעה, למחלה או למוות של המטופל.

אמצעי אחסון

יש להימנע מלחות ושמש ישירה, זמן מדף שנתיים.

יצרן: ב. בראון מדיקל SAS צרפת

כתובת יצרן: 204 אבניו דו מרשל ג'ואה 92107 בולון סודקס, צרפת

יבואן ובעל הרישום: ס. דבליו, טי - טיפול בפצעים כרוניים בע"מ

כתובת יבואן: הגפן 84, מושב גמזו 73130 ישראל / 08-9287778 / www.cwt.org.il

מספר רישום בפנקס האמ"ר: 24360012