


Actreen® Hi-Lite^{Set}

أكترين® رزمة هاي لايت

אקטרין® היי-לייט סט



אקטרין® היי-לייט סט היא ערכת צנתור סטרילית מסוככת מראש ומוכנה לשימוש עם שסתום אל-חזור הכוללת צנתר עם שקית שתן.

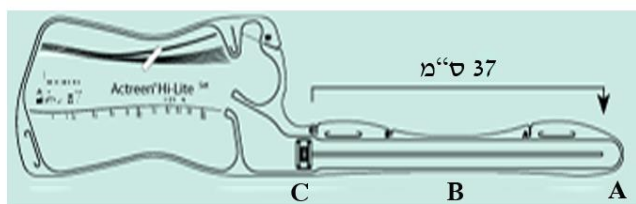

התוויה: מיועדת לצנתור עצמי לסירוגין של שלפוחית השתן.
התוויות נגד: בעת הפקת עלון זה לא ידוע על התוויות נגד.

הוראות שימוש:

יש לפתוח את הערכה על ידי הסרת המדבקה.



1. הכנה:

יש לשטוף ידיים היטב לפני ואחרי הצנתור, ולנקות את האזור שסביב פתח השופכה.

2. פתיחת הצנתר:

• בכדי להסיר את כיסוי המגן לבעלי ידיים יציבות, יש לאחוז ולמשוך בסימון "A".
• לבעלי ידיים רפות, יש להחזיק ביד אחת את הצנתר וביד השנייה להשחיל את האגודל בלולאה בסימון "A" בכדי להסיר את כיסוי המגן.

לטכניקת פתיחה פשוטה ללא מגע יד אדם, יש לשחרר את כיסוי המגן על ידי משיכה וניתוק בסימונים B ו-C.

מערכת ללא מגע יד אדם

לשחרור כל הצנתר מהכיסוי:

• יש לנתק ולמשוך בסימון "C".
• בכדי להסיר את כיסוי המגן, לבעלי ידיים רפות יש להחזיק ביד אחת את המחבר וביד השנייה להכניס את האגודל בלולאה בסימון "C".

כעת, יש לגלול את כיסוי המגן לקפלי אקורדיון כלפי מעלה מבלי לגעת בצנתר.

אמצעי זהירות:

- אין להשתמש אם האריזה פתוחה או ניזוקה.
- שימוש חוזר בערכה חד פעמית עלול לסכן את המטופל ו/או המשתמש. השימוש עלול להוביל לזיהום ו/או לפגיעה ביכולת התפקודית. זיהום ו/או פגיעה בתפקוד הערכה עלולה לגרום לפציעה, מחלה ואף מוות של המטופל.
- צנתור עצמי יבוצע אך ורק בהוראות רופא ועל פי ההוראות המפורטות לעיל.

אמצעי אחרון:

יש להימנע מלחות ושמש ישירה על גבי הערכה. זמן מדף - שנתיים לכל היותר.



3. צנתור:

גבר

- החזק ביד אחת את הפין כלפי מעלה ליישור צינור השופכה.
- ביד השנייה הכנס בזירות את הצנתר לתוך צינור השופכה עד הגיעו לשלפוחית השתן וניקוז השתן לשקית.

אישה

- ביד אחת פסקי את שפתי הפות ואתרי את פתח השופכה.
- ביד השנייה הכניסי בזירות את הצנתר לתוך צינור השופכה עד הגיעו לשלפוחית השתן וניקוז השתן לשקית.

- יש להפעיל לחץ ידני על הבטן התחתונה לקראת סוף תהליך הצנתור כדי להבטיח כי שלפוחית השתן התרוקנה לחלוטין.
- כאשר שלפוחית השתן ריקה לחלוטין, יש למשוך החוצה בזירות את הצנתר.





4. ריקון:

- לריקון השקית, יש לקרוע לאורך הקו המוקוקו שעל גבי השקית.
- בכדי להשליך באופן דיסקרטי את ערכת אקטרין® היי-לייט, יש לקפלה ולהדביקה מחדש בעזרת המדבקה.
- יש להשליך את הצנתר על פי התקנות המקומיות לפינוי פסולת.



או

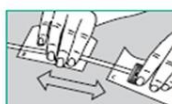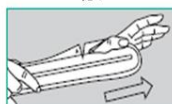

או

