


Askina® Derm

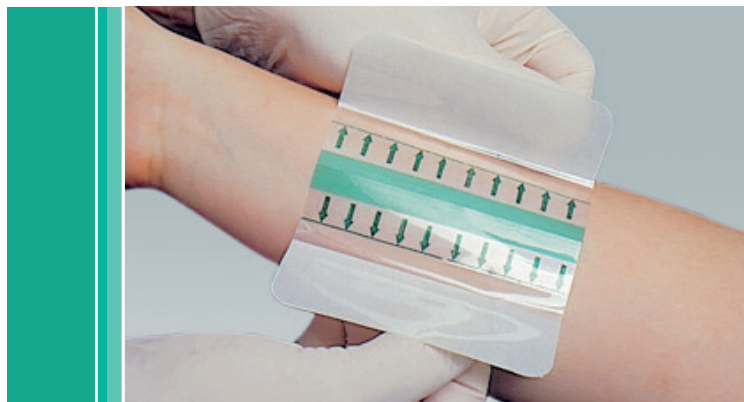

חבישה סטרילית, נושמת ושקופה.

התוויה:

פצעים ללא הפרשה **כגון**: חתכי ניתוח, כוויה דרגה ראשונה, סדקים בעור, קיבוע חבישות, נקזים, עירוי.

תיאור המוצר:

חבישה נדבקת, הסרה אטראומטית, אינה חדירה לנוזלים, נושמת, מגנה על העור. משמשת גם לקיבוע משני.

אופן השימוש:

1. יש לבחור בגודל מתאים כך שיישארו 2-3 ס"מ מסביב לשולי הפצע
2. יש להסיר את שכבת המגן התחתונה ולהצמיד לפצע
3. יש להסיר את שכבת המגן העליונה לצורך קיבוע סופי.
4. החלפת החבישה תתבצע לאחר 7 ימים או בעת החלפת החבישה הראשונית בהתאם להתוויה.

BR036/01 FEB.-16

שם פריט	כמות באריזה	קוד ירפא	מק"ט כללית	מק"ט מכבי	מק"ט לאומית	מק"ט מאוחדת	מק"ט ישראל
ASKINA DERM 6X7CM	100	85685					
ASKINA DERM 10X12CM	10	81448					
ASKINA DERM 10X12CM	50	63304					
ASKINA DERM 10X20CM	10	3736					
ASKINA DERM 15X20CM	10	81449					
ASKINA DERM 20X30CM	10	3820					